

# Cama hospitalaria eléctrica

5 movimientos - Tipo UCI

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2021DM - 0023963



## Especificaciones

## YKB001-2 (320)

Diseñada para cuidados intensivos. Ofrece 5 movimientos independientes: elevación de espaldar, de pieceros, de altura, Trendelenburg y Trendelenburg inverso y funciones especializadas como RCP y silla cardíaca. Construida con materiales resistentes y fáciles de desinfectar, cuenta con 4 motores silenciosos, batería de respaldo y dos controles (Cuidador y personal médico) que permiten un ajuste preciso y personalizado de la posición del paciente. La función de bloqueo de controles y las barandas de seguridad garantizan protección en todo momento. Ideal para pacientes que requieren cuidados críticos.

*Este producto se encuentra sujeto a inventario.*

**Tendido de 4 planos** en lámina ranurada.

**Estructura de acero** con acabado en pintura electrostática.

Imagen ilustrativa\*

**Tableros de cabecero y pieceros** fabricados en plástico ABS.

**4 barandas** en plástico ABS con descenso regulado a través de pistón.

**4 Ruedas de 6"** con bloqueo central.

## Movimientos del producto



Trendelenburg



Trendelenburg inverso



Graduación de altura




Elevación de espaldar



Elevación de pieceros

## Detalles del producto

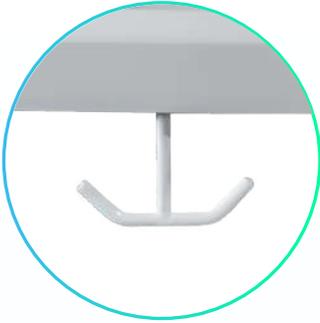

Gancho bolsa de drenaje



Control eléctrico principal



Porta sueros



Control del paciente

## + Incluye

Batería de respaldo

2 controles

4 motores silenciosos

### Cuenta con 2 controles:

- **Uno en la parte superior** con los movimientos de espaldar, pies, cambio de altura, trendelenburg y CPR.
- **Uno en la parte inferior** para uso médico, cuenta con movimientos de espaldar, pies, cambio de altura, trendelenburg, CPR y TR, adicional tiene la función silla cardiaca, igualmente cuenta con la opción de bloquear o desbloquear el control del paciente.

## Medidas sin colchón

Capacidad de peso

 **240kg**

Externas



Del tendido



**\*Medida sugerida de colchón: 1,90 x 90**

"Todas nuestras medidas tienen un intervalo de +-2cm de diferencia."

## Recomendaciones

- Para subir o bajar al paciente, sitúe la cama en la altura mínima o en la que el paciente pueda toca el piso.
- Accione el freno central, siempre que vaya a dejar la cama en un sitio fijo para evitar accidentes.
- No permita que los controles sean accionados por personas inexpertas o en modo de juego.
- Verifique regularmente que las barandas estén ajustadas.
- Realice un aseo general a la cama de manera periódica con un paño húmedo, posteriormente séquela, no utilice productos fuertes que puedan afectar la pintura.
- Ubique la cama en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar corrosión.
- Nunca exceda la capacidad máxima de carga de la cama.
- Puede lubricar los tornillos móviles con regularidad, si desea acompañamiento de nuestro personal, contáctenos.

## Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura, no cubre partes plásticas.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.



Escanea este código para reproducir el video de esta referencia.