

Cama hospitalaria eléctrica

5 movimientos con barandas de aluminio

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2021DM - 0023963

Especificaciones

YKB003 (326)

Tendido de 4 planos
en lámina ranurada.

2 barandas de seguridad
abatibles en aluminio.



Diseñada para el cuidado en casa, ofrece 5 movimientos independientes: elevación de espaldar, pieceros, altura, Trendelenburg y Trendelenburg inverso. Está construida con materiales resistentes y fáciles de desinfectar, e incorpora tableros de cabecero y piecero en ABS de mayor tamaño, totalmente removibles, que facilitan el acceso y la limpieza. Cuenta con batería de respaldo y control para el cuidador, lo que permite realizar ajustes precisos y personalizados en la posición del paciente. Además, sus barandas de seguridad proporcionan protección y confianza en todo momento.

Este producto se encuentra sujeto a inventario.

Tableros de cabecero y pieceros desmontables
fabricados en plástico ABS.

Estructura de acero
con acabado en pintura electrostática.

4 Ruedas de 5"
con freno individual.

Movimientos del producto



0 - 12°

Trendelenburg



0 - 12°

**Trendelenburg
inverso**



45 - 76cm

**Graduación
de altura**



0 - 80°
(+5)

**Elevación
de espaldar**




0 - 40°

**Elevación
de pieceros**

Detalles del producto



Batería principal

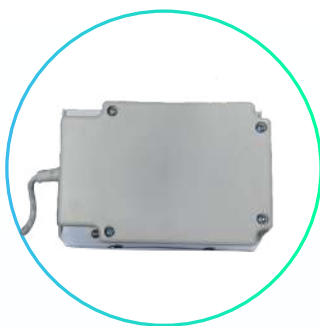

Batería de respaldo



Control del paciente



Porta sueros

+ Incluye



Batería de respaldo



1 Control



Motores silenciosos

Con el control puedes:

Ajustar los movimientos de espaldar, pies, cambio de altura, trendelenburg y trendelenburg inverso.



Medidas sin colchón

Capacidad de peso




250kg

Externas



Alto baranda
38cm

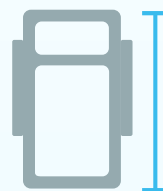


Largo total
208cm

Ancho total
98cm

Del tendido



Alto de tendido
a piso
Máx 70cm
Min 45cm

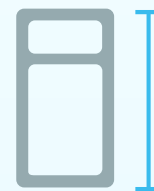

Largo total
193cm

Ancho total
83cm

*Medida sugerida de colchón: 1,90 x 90

"Todas nuestras medidas tienen un intervalo de +-2cm de diferencia."

Recomendaciones

- Para subir o bajar al paciente, sitúe la cama en la altura mínima o en la que el paciente pueda tocar el piso.
- Accione el freno central, siempre que vaya a dejar la cama en un sitio fijo para evitar accidentes.
- No permita que los controles sean accionados por personas inexpertas o en modo de juego.
- Verifique regularmente que las barandas estén ajustadas.
- Realice un aseo general a la cama de manera periódica con un paño húmedo, posteriormente séquela, no utilice productos fuertes que puedan afectar la pintura.
- Ubique la cama en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar corrosión.
- Nunca exceda la capacidad máxima de carga de la cama.
- Puede lubricar los tornillos móviles con regularidad, si desea acompañamiento de nuestro personal, contáctenos.

Garantía

El producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura, no cubre partes plásticas.

¡Importante! No retire los stickers de registro sanitario ni los seriales, ya que son necesarios para validar la garantía.

Observaciones:

- * Las especificaciones reales del producto difieren de los datos en un intervalo de ± 2 cm de diferencia.
- * Las especificaciones reales del producto pueden variar según las diferentes configuraciones.
- * TME se reserva el derecho de modificar la información aquí incluida sin previo aviso.

www.tmecol.com |    