
# **Mac Back**



## Descripción del dispositivo médico

Espaldar para posicionamiento y alto confort de usuarios con hipersensibilidad cutánea y deformidades fijas, con carcasa rígida en aluminio, con posibilidad de interfase en foamy de doble capa (Dual Layer Foamy) suave y firme ó fibra de estamina, que permita liberación de presión y acompañe la deformidad del usuario. Con apoyos laterales de tronco de mayor dimensión con profundidad de (3,5 ", 6 " ó 9") regulables en altura que facilite el posicionamiento de la asimetría corporal y funda en material transpirable. Con accesorio Shape de inserto de forma moldeable. Ideal para pacientes con protuberancias marcadas y asimétricas.

♣ Características

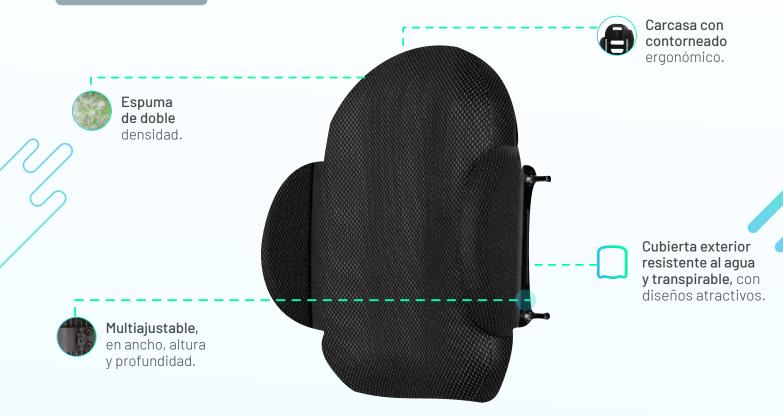



Soportes laterales



Corrección de escoliosis leve




Fijación estándar.



Interfaz de apoyacabezas

### 🖳 Medidas

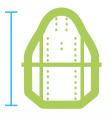









Ancho Altura

Ajuste de profundidad

Ángulo de ajuste

Tallas disponibles						
Model #	Altura total	Ancho total	Ajuste de profundidad	<b>Ángulo de</b> ajuste	Capacidad de peso	Peso del producto
MAC (Standard)	16"	16", 15", 18"	4"	40° rango	136 kg	2 kg
MAC (Heavy- Duty)	18"	16", 17", 19″	4″	40° rango	136 kg	2 kg
MACxW16 (Extra Wide) MACxW20 (Extra Wide)	20", 22″	18", 19", 20", 22"	4"	40° rango	136 kg	2 kg

Nota: El ancho, la profundidad, la altura capacidad y peso del producto se determina dependiendo de la medida requerida.

Indicación para formular este espaldar: Para paciente con protuberancias se recomienda formular el inserto de forma moldeable a deformidades marcadas y asimétricas.

#### Recomendaciones

- No exceder la capacidad de peso del espaldar.
- Al instalar asegurarse de ajustar correctamente el espaldar según la postura y necesidades del paciente.
- Limpiar la cubierta exterior en lavadora (máx 60°).
- Verificar periódicamente los ajustes para garantizar un soporte óptimo y la máxima durabilidad.

#### 

El producto cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fábrica.

ilmportante! No retire los stickers de registro sanitario ni los seriales, ya que son necesarios para validar la garantía.

#### Observaciones:

- \* Las especificaciones reales del producto difieren de los datos de la tabla en ±1 cm ±0,5 kg.
- \* Las especificaciones reales del producto pueden variar según las diferentes configuraciones.
- \* MATRX se reserva el derecho de modificar la información aquí incluida sin previo aviso.

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2024DM-0029508

www.tmecol.com □ @ f &

